



限定 イオンクロマト スタンプラリー

こちらの用紙をヴェオリア・メトローム
ブースにお持ちいただき、裏面のスタンプ
スペースをお見せいただければ、それぞれ
右記のプレゼントがもらえます！

*プレゼントは先着順となります。

*在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。



ヴェオリアオリジナル
ビーカーまたはハイチュウ



ブース番号：6B-403



メトローム
フリクションボールペン
または トートバッグ




ブース番号：6B-501



水で研究・分析を応援するヴェオリア(エルガ)

PURELAB シリーズは 採水口フィルターフリー設計

- 採水口フィルター内の滞留水による水質劣化のリスクを低減
- 採水口フィルター交換のための労力やコストそのものを削減
- 採水口フィルター交換後の面倒な洗浄は不要

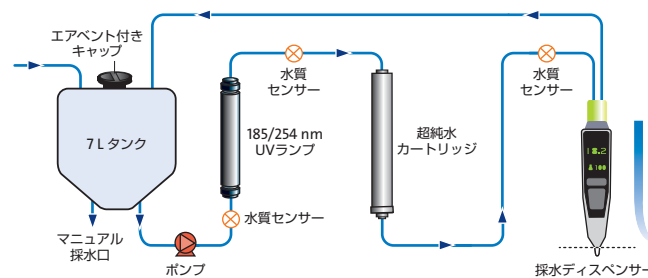


採水ディスペンサーの
先端まで
水が循環する設計

採水口フィルターフリー設計による水質劣化 リスクの低減例

高感度分析用超純水製造装置の採水口に各種フィルターを
装着した場合としない場合の採水水質を比較。
フィルターを装着しない場合が最も検出物質が少なく、
バックグラウンドが低く安定します。


分析方法 Column : Develosil FlexFire AQ C18, 1.6 μ m (2.0x100 mm)
System : Waters ACQUITY UPLC H-Class PLUS
Mobile phase : A) Water B) Acetonitrile
Detection : UV 210 nm injection volume 10.0 μ L (野村化学株式会社様ご提供)

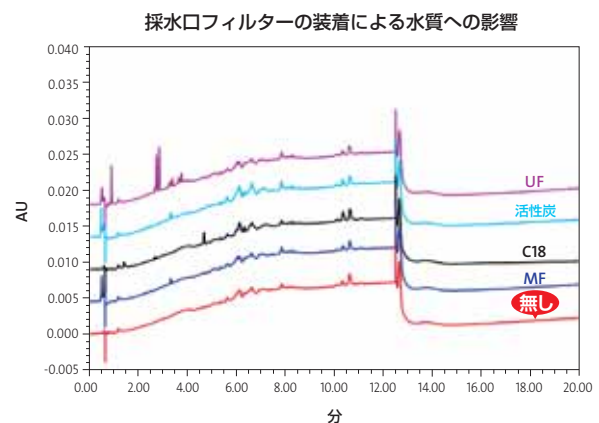

イオンクロマトグラフ (IC) ならメトローム

陰イオン・陽イオン・有機酸分析に対応したイオンクロマトグラフシステムをラインアップ。自動化、豊富なアプリケーション、装置3年保証・ソフトウェア5年保証・アニオンサプレッサ10年保証で分析業務をサポートします。

■ ラボ IC と PURELAB flex 3+ のイメージ

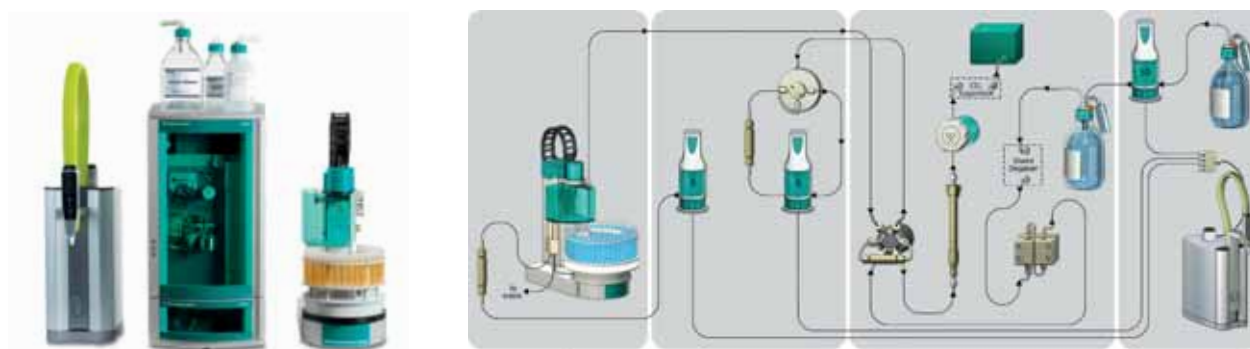

■ プロセス IC と PURELAB flex 3+ のイメージ



ヴェオリア・ラボウォーターの超純水製造装置“PURELAB flex 3+”は、イオンクロマトグラフの要件に合わせて、メトローム社との共同開発により製品化されました。PURELAB flex 3+ が採用する **ダイレクトフィード(直接供給)方式** には、循環チャンバーが組み込まれており、これにより、常に高純度な超純水をメトローム社のイオンクロマトグラフへ供給することが可能となっています。

↓↓ スタンプスペースはこちら ↓↓



ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
ラボウォーター事業部
〒108-0022 東京都港区海岸 3-20-20
ヨコソーレインボータワー 3F
e-mail: jp.elga.all.groups@veolia.com
<https://jp.elgalabwater.com>

メトロームジャパン株式会社
(Metrohm Japan Ltd.)
〒143-0006 東京都大田区平和島 6-1-1
東京流通センター アネックス 9F
e-mail: metrohm.jp@metrohm.jp
https://www.metrohm.com/ja_jp.html